


INTERNATIONAL  
**ITC**  
 TECHNIDYNE  
 CORPORATION

Tenderfoot preemie  
 Frühgeborene und untergewichtige  
 Säuglinge  
 T: 0,85 mm, L: 1,75 mm

Tenderfoot micro-preemie  
 Neugeborene <1000 g  
 T: 0,65 mm, L: 1,4 mm

Tenderfoot newborn  
 Säuglinge bis ca. 6 Monate  
 T: 1,0 mm, L: 2,5 mm

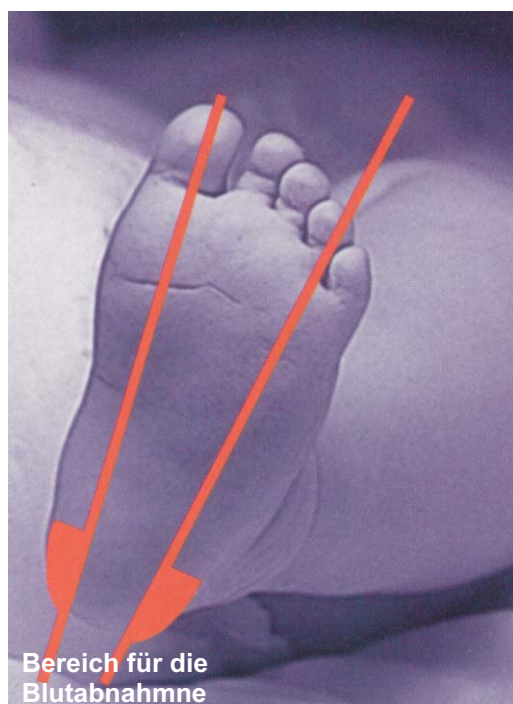

Bereich für die  
 Blutabnahme

# Tenderfoot® Kurzanleitung

Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte dem Packungsbeileger.

**LOXO GmbH**  
 Postfach 1130  
 69215 Dossenheim

Tel.: +49 (0)6221 868023 Fax: +49 (0)6221 8680255  
 e-mail: [info@loxo.de](mailto:info@loxo.de) Internet: <http://www.loxo.de>



1. Reinigen



2. Entsichern



3. Aufsetzen und auslösen



4. Tenderfoot entfernen



5. Ersten Tropfen Blut abwischen



6. Probenvolumen abnehmen